



CYFROWE JEDNOCZASOWE APARATY Z ZAKOTWIENIEM TYMCZASOWYM (TAD) Implantacja i montaż aparatu na jednej wizycie!


- **Rola tymczasowych zakotwień:**
 - ✓ Ekspansja i rozbudowa łuku dokładnie pod potrzeby leczenia
 - ✓ Intruzje i wtłoczenia
 - ✓ Trakcja klasy III
 - ✓ Mezjalizacja i dystalizacja
 - ✓ Szybkie opcje terapeutyczne
 - ✓ Możliwość łączenia różnych ruchów zębów jednym aparatem zaprojektowanym cyfrowo
- **Korzyści z zastosowania cyfrowo zaprojektowanego jednoczasowego aparatu z TAD**
 - ✓ Zapewnia jednocześnie łatwe wprowadzanie aparatu i brak potrzeby współpracy z pacjentem
 - ✓ Podczas montażu aparatu osiągnięta jest najwyższa precyzja bez względu na trudności anatomiczne miejsca wprowadzania, bezpieczeństwo
 - ✓ Możliwe i zalecane natychmiastowe obciążenie aparatem
 - ✓ Procedura minimalnie inwazyjna
 - ✓ Samodzielna praca bez angażowania innych lekarzy
 - ✓ Łatwe do usunięcia (implanty czasowe, samogwintujące)




PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA

Od lekarza


Skan zębów
.stl
(lub wycisk)



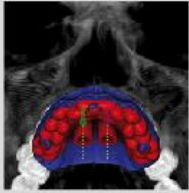

Badanie CBCT
(pliki DICOM)



Projekt aparatu



Warsztat



Na gotowo



Nasze rozwiązania w ortodencji bazujące na technologii 3D i CAD/CAM



STL
vs
DDP-Ortho



DDP-
Ortho



A-aligner



Retainer
for life



IPA



IPA-
procedura

- Badanie CBCT – plik DICOM
- Skan - plik .stl /model
- Planowanie położenia miniimplantów ortodontycznych / akceptacja projektu
- Projekt aparatu na miniimplantach

ZAKRES USŁUGI

- Kompletny pakiet dla jednoczasowego aparatu TAD dla lekarza:
 - ✓ kompleksowa asysta techniczna,
 - ✓ opracowanie techniczne przypadku (scalenie CBCT + stl/DDP-Ortho)
 - ✓ projektowanie on-line zabiegu z lekarzem lub konsultacja / akceptacja
 - ✓ wydruk szablonów
 - ✓ Wykonanie aparatu TAD
 - ✓ Opcjonalnie dostarczenie miniimplantów

CENY PRZYKŁADOWYCH KOMPLETÓW DOPASOWANYCH INDYWIDUALNIE DLA RÓŻNYCH APARATÓW

- Kalkulacja dla aparatu Hyrax hybrydowy (odpowiednik min. aparatu typu TransForce)
 - ✓ szablon chirurgiczny (projekt, licencja DDS-Pro, wydruk): 500 zł
 - ✓ gotowy aparat (model drukowany, pierścienie, śruba): 1160 zł
- Kalkulacja dla aparatu typu slider (odpowiednik min. aparatu typu TransVerse Sagital)
 - ✓ szablon chirurgiczny (projekt, licencja DDS-Pro, wydruk): 500 zł
 - ✓ gotowy aparat (model drukowany, pierścienie, śruba): 1150 zł
- Kalkulacja dla aparatu kombinowanego (dystalizacja i ekspansja łuku jednocześnie)
 - ✓ szablon chirurgiczny (projekt, licencja DDS-Pro, wydruk): 500 zł
 - ✓ gotowy aparat (model drukowany, pierścienie, elementy): 1590 zł

Zapewniamy:

- Bezpłatne oprogramowanie DDS-Pro (licencja Viewer) dla podglądu projektu
- Pełną asystę techniczną

Co otrzymujesz od nas aby zacząć produkcje szablonów

Bezpłatne szkolenia , wsparcie z zakresu oprogramowania DDS-Pro

